



HearAll™

Cell Phone Amplifier

Operating Guide

Model
SA-40



Thank you for purchasing this HearAll™ Cell Phone Amplifier. Please read this operating guide very carefully before use and keep it for future reference. If you have any questions, please feel free to contact our Customer Care Department.

Toll-Free Help Line: 866.376.9271 (9AM-5PM PST, M-F)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

Read all the instructions before using the appliance.


1. This product uses rechargeable batteries. Do not use any non-rechargeable batteries as charging of this type can cause battery leakage.
2. Do not make contact with any moving parts or any exposed metal surfaces.
3. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
4. Do not use near water.
5. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning. Do not operate any device with a damaged cord or plug, or after the device malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return device to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued):


6. When you are driving a car, driving is your first responsibility. When using this device while driving, follow local, city and state driving regulations regarding cell phone calls while driving.
7. Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
8. Do not use this device to report a gas leak in the vicinity of the leak.
9. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this device is used near children.
10. For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.
11. Please dispose of the unit/used batteries properly, following any local regulations. Do not dispose of the unit/used batteries in the household trash. Take the equipment to a nearby recycle center.

PACKAGE CONTENT CHECK:

Your HearALL™ Cell Phone Amplifier is packaged with all of the items shown. If anything is missing, please contact our Customer Care Department immediately.

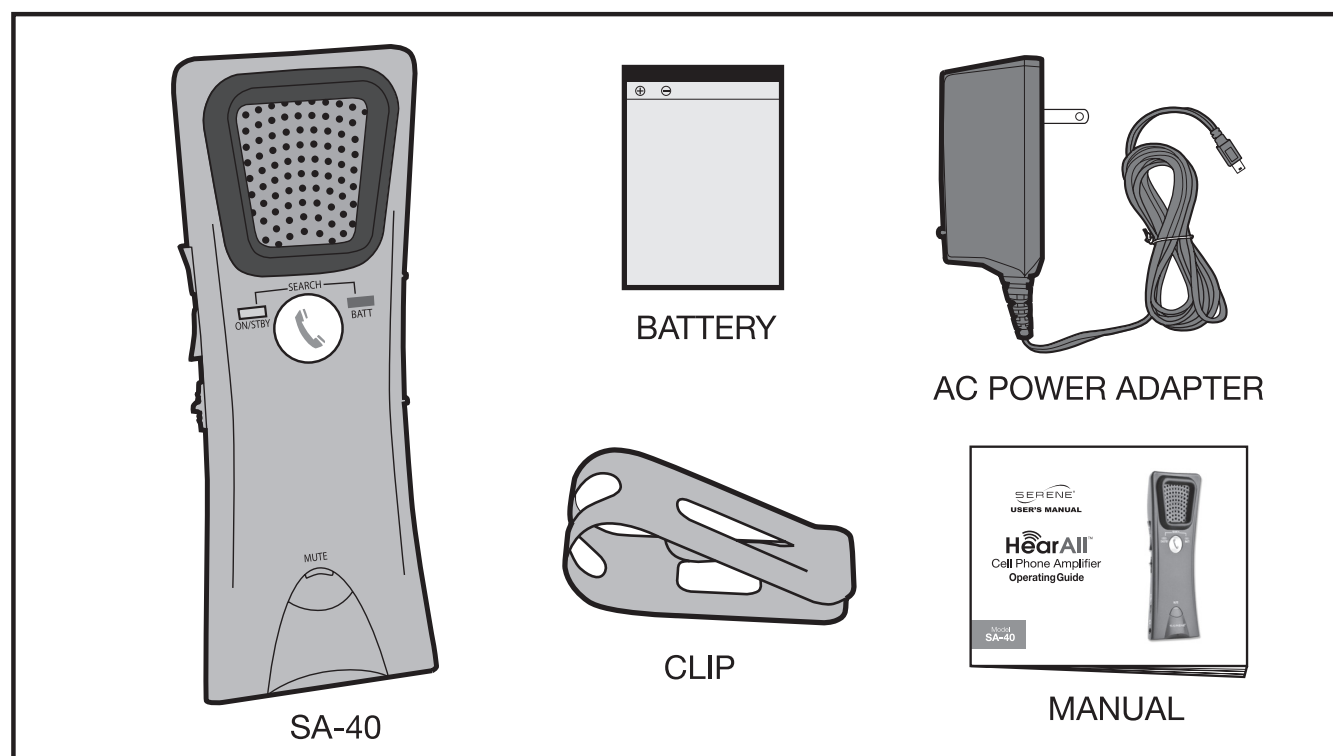

FEATURE IDENTIFICATION:


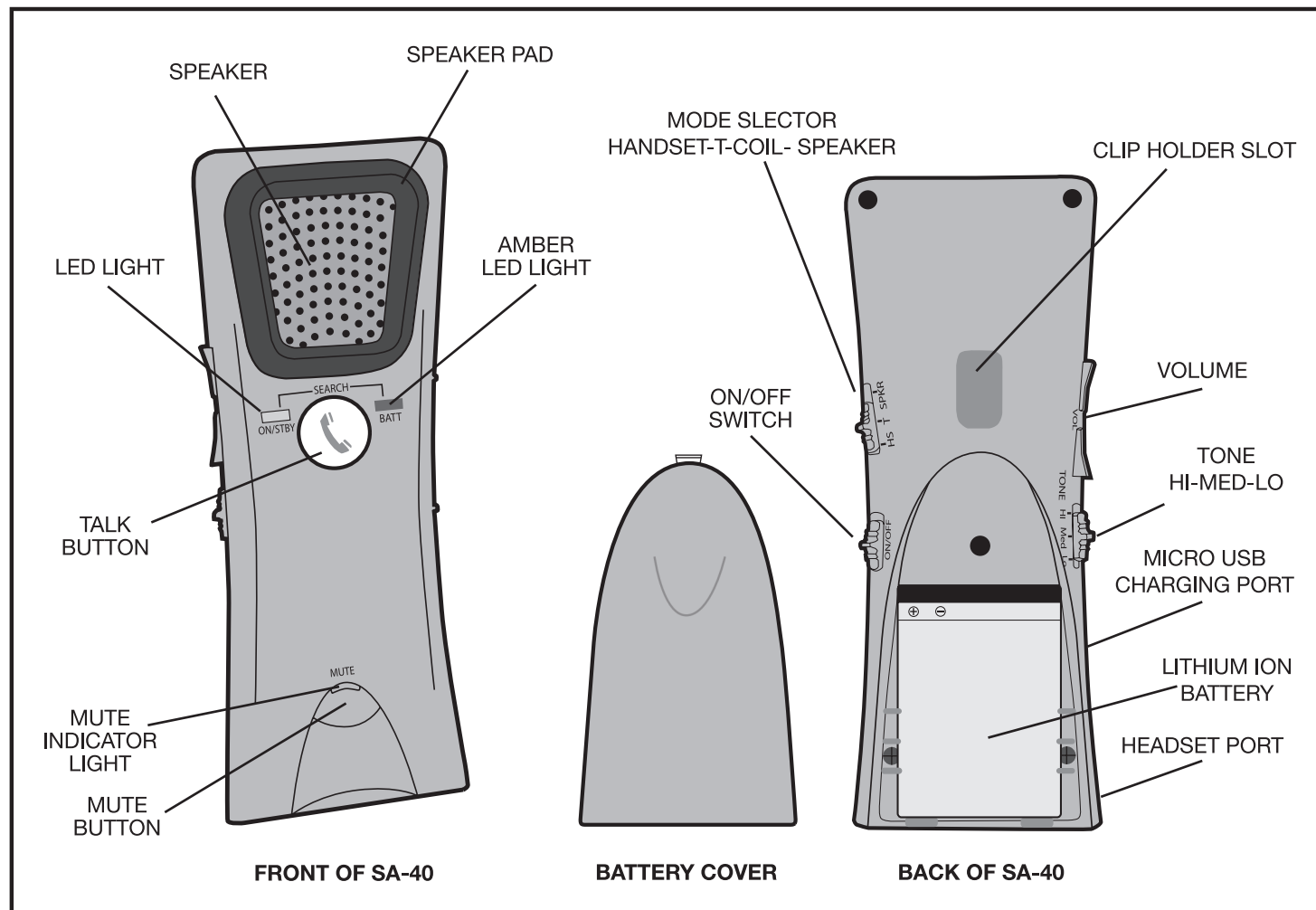


INSTALL BATTERY:

1. Install battery as shown.
2. Charge before use. Allow approximately 3-4 hours for the charging process.

CHARGING THE SA-40:

1. When your SA-40's battery charge is low, the Battery Indicator Light will continuously flash.
2. To charge the SA-40, connect AC Adapter as shown. Typical charging to full charge is 3-4 hours. While the SA-40 is charging, the Battery Indicator Light will be steadily lit.
4. When the the SA-40 is fully charged, the Battery Indicator Light will go out.
5. The SA-40 should never be connected to the AC Power Adapter for more than one week.

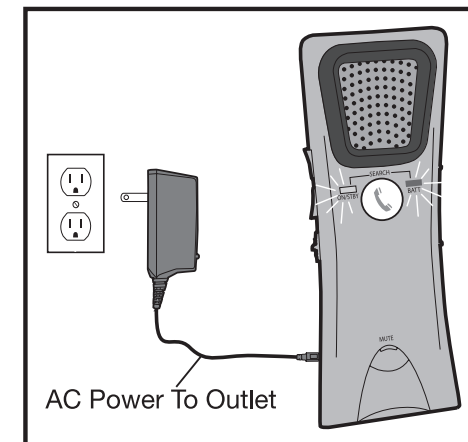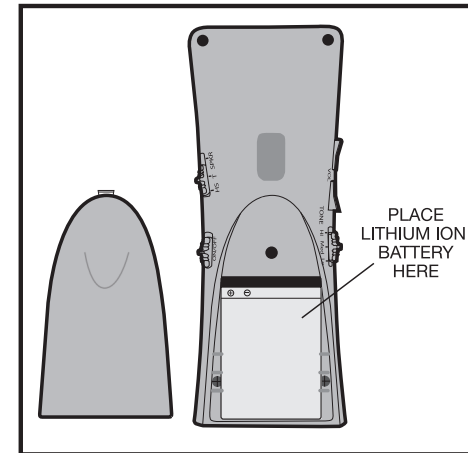


FACTORY PRESETS:

For your convenience, your Model SA-40 HearAll™ Cell Phone Amplifier comes to you from the factory with the following pre-set:

- Mode of Operation: Handset
- Volume: Medium
- Tone: Medium

PAIRING THE SA-40 WITH YOUR CELL PHONE:

1. To perform the initial pairing, activate the *Bluetooth*®* features of your cell phone.
2. Turn on the SA-40. It will blink as it pairs to your cell phone. Follow the prompts on your cell phone to complete pairing. If your cell phone asks for a Pin Number, enter: 0000. The SA-40 will remain paired until you delete it from your cell phone.

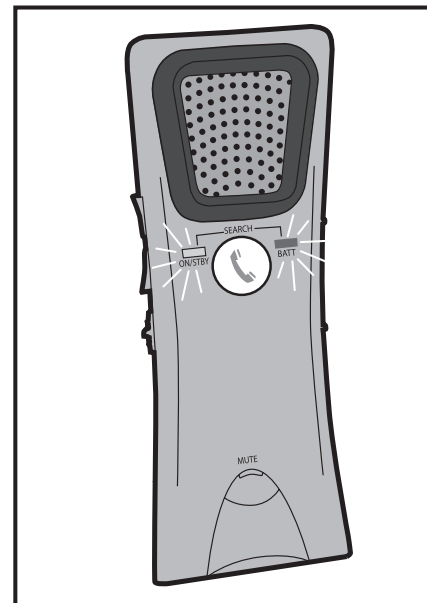

OPERATIONS:


Select an Operating Mode:

- HS – Slide the mode switch on the right side of your phone to your preferred mode. Use the SA-40 as a handset, holding the speaker grill against your ear.
- T- Couple with your T-Coil Hearing Aid to hear through your hearing aid.
- SPKR – Use as a speakerphone, for hands-free conversation.


PLEASE NOTE: The SA-40 amplifies your caller's voice up to 100 times louder than your cell phone. Use care when setting phone volume to avoid damage to your hearing. The SA-40 should always be set to (HS) mode when handset is pressed to the ear. Do not press the SA-40 to your ear if in SPKR Mode.

Some cellphones may produce more noise than others. This noise is also a function of the strength of the cell phone signal, which can vary from place to place.



Answer A Call Using the SA-40:

1. When your phone rings, press  to answer.
2. Adjust volume to the desired level by pressing the VOL (+) and (-) buttons. You will hear a beep when the volume has reached the minimum and maximum volumes.

OPERATIONS (continued):

3. To enhance clarity, adjust the tone by moving the tone switch to the setting where you hear best. The SA-40 will save this setting for future calls.
4. Press  to end the call.

Make A Call Using the SA-40:

1. Press  to get on line.
2. If your cell phone is equipped with voicemail, speak the desired name or number into the SA-40.
3. If your cell phone does not have voicemail, enter the desired number on your cell phone keypad.
4. Press  to end the call.

Using Your SA-40 in Your Car:

1. Attach the visor clip securely to the car's visor.
2. Set the SA-40 to **SPKR** (Speakerphone) mode and attach it to the visor clip (provided). Always follow all local, city and state driving regulations regarding cell phone calls while driving.

OPERATIONS (continued):

Using Your SA-40 with Your T-Coil Hearing Aid:

1. Set the mode selector to “T” (T-Coil mode) not SPKR mode. No sound will be emitted from the SA-40 speaker.
2. Place speaker grill of the SA-40 over your hearing aid.

Using the Mute Button:

1. Press the mute button to mute the microphone on the SA-40. The mute indicator will light up. Press it again to un-mute.

TROUBLESHOOTING:

- Why can't my caller hear me? You may have your mute button on.
- Can I use voice command on the SA-40 to access voicemail? Yes, if your cell-phone supports this operation.
- How often should I charge my SA-40? Depending on usage, we recommend a daily or weekly charging.
- My SA-40 is turned on and is paired with my cell phone, why can't I receive or make calls? You may be out of range. Your SA-40 works within 30 feet from your paired cellphone.

SPECIFICATIONS (Product may vary.):

Talk Time:	Up to 10 hours ¹
Standby Time:	Up to 14 days ¹
Operating Range:	Up to 33 feet from phone
Weight:	About 3 oz. (battery installed)
Dimensions:	About 5.5 in x 2.0 in. x 1.3 in (L x W x H) without clip
Charge Connector:	Micro USB
Battery Type:	3.7V/800mAh Lithium Ion
Charge Time (Max):	Approximately 3-4 hours to full charge
Charging Requirements:	5 VDC – 400mA
<i>Bluetooth</i> [®] * Version:	v.2.1
<i>Bluetooth</i> [®] * Profiles:	HFP, HSP, A2DP
Operating Temperature:	Operating: 0C-40C
Storage Temperature:	Storage: -10C-50C

Note:1- Performance is dependent upon battery and may vary by device.

Manufactured for Serene Innovations, Inc. by Celltrend, China

WARRANTY/SERVICE INFORMATION:

Your HearAll™ Cellphone Amplifier comes with a one year limited warranty. We warrant during this warranty period from the date of purchase to the original consumer that your HearAll™ Cellphone Amplifier will be free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that HearAll™ Cellphone Amplifier fails to function properly within one year of original purchase due to defects in materials or workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you if the unit is returned within 30 days of purchase. If the unit is returned after 30 days of purchase but within the warranty period, there will be a warranty handling charge of U.S. \$9.95 for each return.

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged due to: abuse, misuse, negligence, use on electrical frequency or voltage other than marked on product and/or described in this manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs and/or tampering are also not covered by this warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights

WARRANTY/SERVICE INFORMATION (continued):

that vary from state to state. If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care Representative by phone or log on to www.sereneinnovations.com to obtain a Return Merchandise Authorization number and shipping instructions before returning the product to us. Any shipment without a RMA will not be accepted and will be returned to you at your expense.

Any authorized returned product must be accompanied with proof of purchase and a brief description of the problem. For out of warranty repair and service, please contact our Customer Care Department for directions.

Merci d'avoir acheté cet amplificateur téléphonique Hear AllMD. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le présent guide et le conserver pour consultation ultérieure. N'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle si vous avez des questions.

Numéro d'aide (sans frais) : 866.376.9271 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h – heure normale du Pacifique)

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez bien lire toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.


1. Ce produit fonctionne avec des batteries rechargeables. Ne pas utiliser de batteries non-rechargeables, qui pourraient couler dans l'appareil.
2. Ne toucher aucune pièce mobile ni aucune surface métallique exposée de cet appareil.
3. N'utiliser que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
4. Ne pas utiliser à proximité de l'eau.
5. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher l'appareil. Pour le débrancher, saisir la fiche et non le câble. Débrancher de la prise entre les utilisations et avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. N'utiliser aucun appareil dont la fiche ou le câble est endommagé de quelque manière que ce soit, et le faire réparer par un technicien autorisé qui l'évaluera, le réparera ou y apportera des modifications électriques ou mécaniques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite):


6. Au volant, votre seule priorité est de conduire. L'utilisation de cet appareil au volant est assujettie aux règlements municipaux, régionaux et provinciaux sur l'utilisation du téléphone cellulaire au volant.
7. Éviter d'utiliser cet appareil pendant un orage électrique afin d'éviter les risques minimes de choc électrique causé par la foudre.
8. Ne pas utiliser cet appareil pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de la fuite.
9. Pour éviter les blessures, bien surveiller les enfants lorsque vous utilisez cet appareil autour d'eux.
10. Port sur le corps : cet appareil a été testé et répond aux directives de la FCC RF sur l'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé avec les accessoires fournis ou conçus pour cet appareil. L'utilisation avec d'autres accessoires n'est pas nécessairement conforme aux directives de la FCC RF sur l'exposition aux fréquences radio.
11. Veuillez jeter l'appareil et les batteries de manière responsable et conformément aux règlements en vigueur dans votre région. Ne pas jeter l'appareil ni les batteries avec les déchets domestiques : les recycler dans un centre de recyclage spécialisé.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :


L'emballage de votre amplificateur téléphonique HearALL™ comprend les articles illustrés ici. Si l'un d'entre eux ne se trouve pas dans l'emballage, veuillez contacter notre service à la clientèle immédiatement.

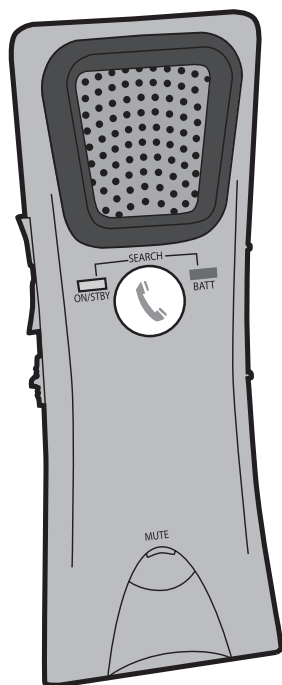


SA-40

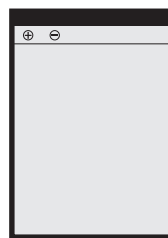


BATTERIE

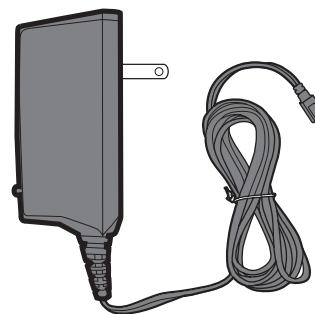

ADAPTATEUR C.A.

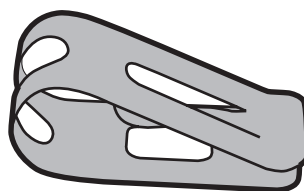


PINCE

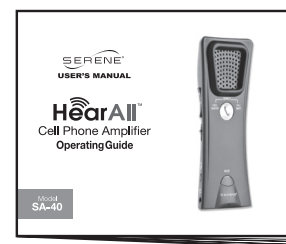

GUIDE DE L'UTILISATEUR

CARACTÉRISTIQUES:


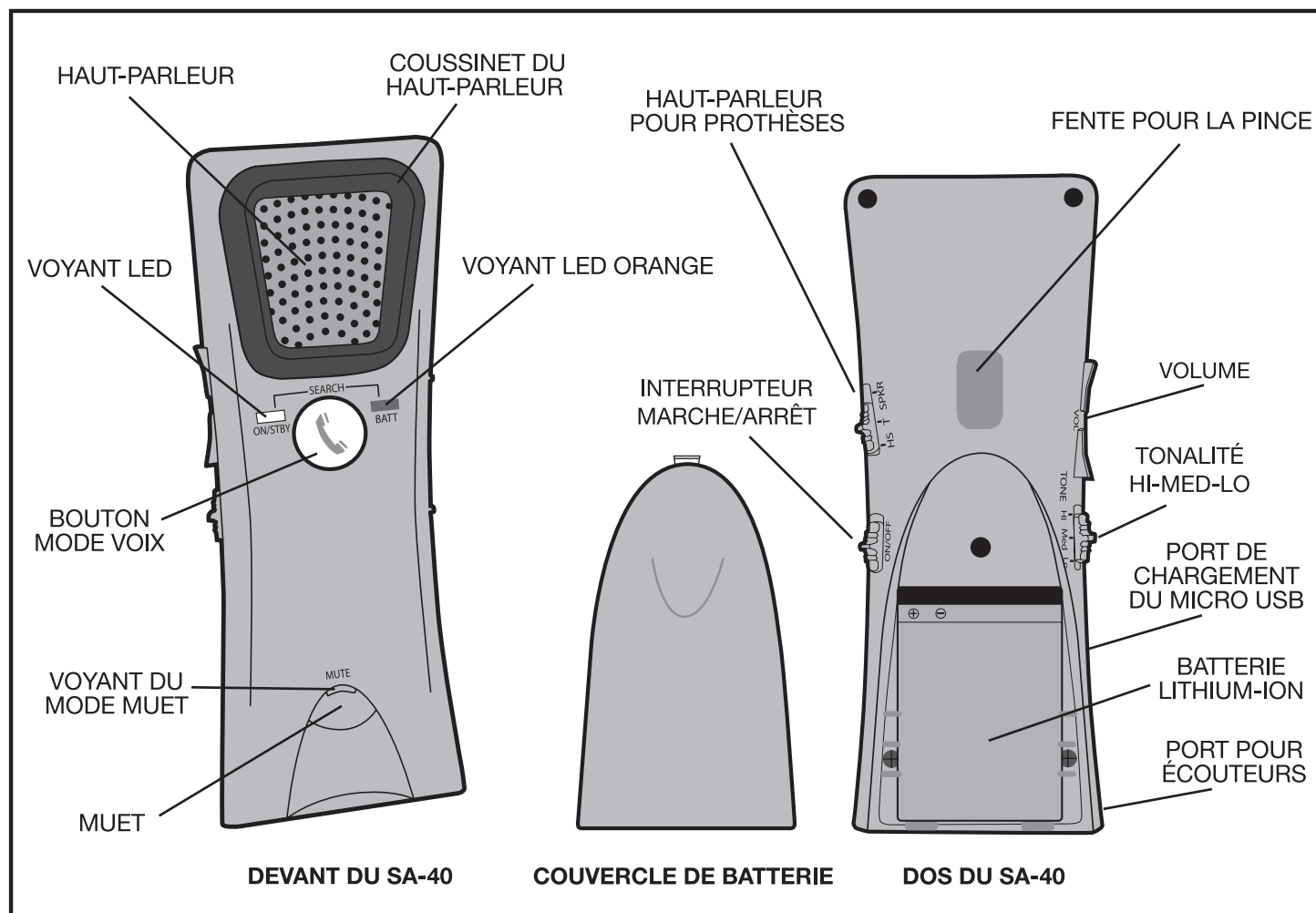


INSTALLER LA BATTERIE:

1. Installer la batterie tel qu'illustré.
2. Charger avant d'utiliser. La batterie se charge en 3 à 4 heures.

CHARGER LE SA-40:

1. Si la batterie de votre SA-40 est déchargée, le voyant de charge de la batterie clignote.
2. Pour charger le SA-40, brancher l'adaptateur C.A. tel qu'illustré, pendant environ 3-4 heures au total. Lorsque le SA-40 est en charge, le voyant de chargement de la batterie reste allumé.
3. Lorsque le SA-40 est chargé, le voyant de chargement de la batterie s'éteint.
4. Le SA-40 ne doit jamais être branché à un adaptateur de C.A. pendant plus d'une semaine.

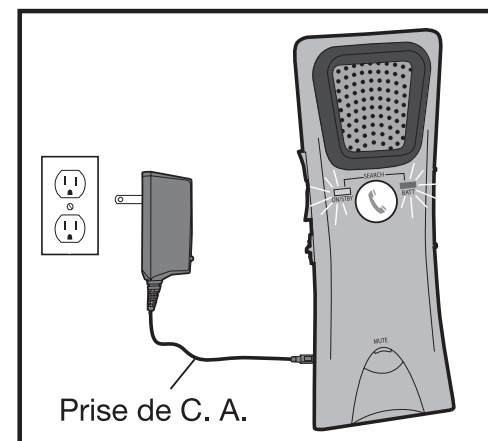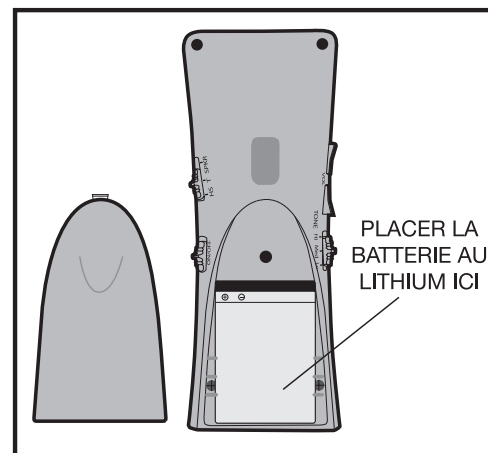


RÉGLAGES DU FABRICANT:

Pour votre convenance, votre amplificateur téléphonique SA-40 HearAll™ a été réglé selon la configuration suivante:

- Mode de fonctionnement: Combiné
- Volume: Medium
- Tonalité: Médium

ASSOCIER LE SA-40 À VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE:

1. Pour l'association initiale, activer la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone.
2. Mettre le SA-40 en marche. Il clignote pendant l'association avec votre téléphone. Suivre les consignes de votre téléphone pour finaliser l'association. Si votre téléphone demande un code, saisir 0000. Le SA-40 y restera associé jusqu'à ce que vous le supprimiez de votre téléphone.

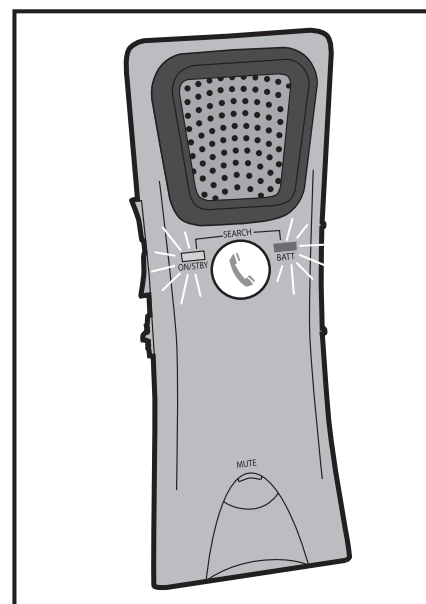

FONCTIONNEMENT:

Choisir un mode de fonctionnement :

- HS - Combiné Glisser l'interrupteur qui se trouve à la droite de votre téléphone vers le mode de votre choix. L'utilisation du SA-40 en mode combiné consiste à le tenir à l'oreille.
- T - Utilisation avec votre prothèse auditive pour écouter à partir de cette dernière.
- SPKR – Haut-parleur Utiliser avec haut-parleur pour une communication mains libres.


AVIS: Le SA-40 amplifie la voix de votre interlocuteur jusqu'à cent fois plus fort que votre téléphone cellulaire. Régler judicieusement le volume afin d'éviter les lésions auditives. Le SA-40 doit toujours être en mode HS – Combiné lorsque vous tenez le combiné à l'oreille. Ne jamais tenir le SA-40 à l'oreille lorsqu'il est en mode SPKR – Haut-parleur.

Certains téléphones ont un son plus fort que d'autres, parfois selon la force du signal téléphonique, qui peut varier selon les endroits.



RÉPONDRE À UN APPEL AVEC LE SA-40:

1. Le téléphone sonne. Appuyer sur  pour répondre.
2. Ajuster le volume en appuyant sur VOL (+) et (-). Vous entendez un bip lorsque le volume minimum ou maximum est atteint.

UTILISATION (suite):

3. Pour plus de clarté, ajuster la tonalité en glissant l'interrupteur de tonalité au réglage qui vous convient. Le SA-40 enregistre le réglage pour les appels subséquents.
4. Appuyer sur  pour raccrocher.

FAIRE UN APPEL AVEC LE SA-40:

1. Appuyer sur  pour décrocher.
2. Si votre téléphone permet la composition vocale, dites le numéro ou le nom que vous souhaitez appeler dans le SA-40.
3. Si votre téléphone ne permet pas la composition vocale, composer le numéro sur le cadran.
4. Appuyer sur  pour raccrocher.

UTILISER LE SA-40 EN VOITURE:

1. Bien fixer la pince au pare-soleil de la voiture.
2. Mettre le SA-40 en mode SPKR (haut-parleur) et le fixer à la pince prévue à cette fin (incluse). Toujours respecter le code de la route et les règlements municipaux et provinciaux sur l'utilisation des téléphones cellulaires au volant.

UTILISATION (suite):

Utiliser le SA-40 avec votre prothèse auditive :

1. Mettre l'appareil en mode "T" (prothèse auditive) et non en mode SPKR. Aucun son ne sera émis par le haut-parleur du SA-40.
2. Mettre la grille du haut-parleur du SA-40 sur votre prothèse auditive.

BLOQUER LE HAUT-PARLEUR:

1. Appuyer sur le bouton « Mute » du micro du SA-40. Le voyant du mode muet s'allume. Appuyer de nouveau pour débloquer le haut-parleur.

DÉPANNAGE :

- Mon interlocuteur ne m'entend pas. Vous avez peut-être bloqué le haut-parleur.
- Puis-je utiliser la commande vocale pour prendre mes messages sur le SA-40?
Oui, si votre téléphone est muni de cette fonctionnalité.
- À quelle fréquence dois-je charger mon SA-40? Selon l'utilisation, il est recommandé de le charger une fois par jour ou une fois par semaine.
- Mon SA-40 est allumé et associé à mon téléphone cellulaire, mais je ne peux ni recevoir ni émettre des appels? Vous n'avez peut-être pas de signal. Votre SA-40 fonctionne s'il se trouve à moins de 9 mètres du téléphone associé.

DÉTAILS TECHNIQUES (peuvent varier):

Autonomie en conversation:	Jusqu'à 10 heures ¹
Autonomie en veille:	Jusqu'à 14 jours ¹
Zone de fonctionnement :	Jusqu'à 10 m du téléphone
Poids :	Environ 85 g (avec la batterie)
Dimensions:	14 cm x 5 cm x 3 cm (sans la pince)
Connecteur :	Micro USB
Batterie :	3.7V/800mAh Lithium Ion
Temps de charge (max):	3 à 4 heures, recharge complète
Exigences de charge :	5 VDC -400mA
Version Bluetooth ¹ :	v.2.1
Profils Bluetooth :	HFP, HSP, A2DP
Température de fonctionnement :	0°C - 40°C
Température de rangement :	-10°C- 50°C

Avis : Le fonctionnement varie selon la batterie et peut varier d'un appareil à l'autre.

Fabriqué pour Serene Innovations, Inc. par Celltrend, China.

GARANTIE:

Le TV HearAll™ Cellphone Amplifier comprend une garantie d'un an. Pendant la période couverte par la garantie, à partir de la date d'achat, nous garantissons que le HearAll™ Cellphone Amplifier sera exempt de défauts matériels ou de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique. Advenant le cas où HearAll™ Cellphone Amplifier cesserait de fonctionner correctement moins d'un an après la date d'achat, à cause de défauts matériels ou de fabrication, renvoyez l'appareil (fret prépayé) avec la preuve d'achat (reçu de vente ou bordereau d'expédition, sans exception) à Serene Innovations. Serene Innovations s'occupera de remplacer ou de réparer l'appareil (par un appareil réusiné ou dans la même condition), puis vous le renverront sans frais (service d'expédition terrestre UPS/USPS), si vous retournez l'appareil trente jours ou moins après la date d'achat. Si l'appareil est retourné plus de trente jours après la date d'achat, mais à l'intérieur de la période de garantie, vous devrez payer des frais de manutention de 9,95\$ par renvoi.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été accidentellement endommagés à cause d'un mauvais usage, d'un usage abusif ou négligent, ou parce qu'ils ont été alimentés avec un voltage électrique ou une fréquence autres que ce qui est indiqué sur le produit et dans le manuel d'instructions. Les défauts et les erreurs causés par des modifications, des réparations ou le traficage non



HearAll™

Cell Phone Amplifier

Guide de l'utilisateur

Model
SA-40



GARANTIE (suite):

autorisé ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Certains droits peuvent s'ajouter selon les États. En cas de défaut couvert par cette garantie, vous devez immédiatement communiquer avec un représentant au service à la clientèle par téléphone ou en vous rendant au www.sereneinnovations.com pour obtenir un code Return Merchandise Authorization (RMA) et pour obtenir des instructions d'expédition avant de nous renvoyer le produit. Tout colis sans RMA sera refusé et vous serez renvoyé à vos frais.

Tout renvoi autorisé de produit doit être accompagné de la preuve d'achat et d'une brève description du problème. Pour le service et les réparations d'après garantie, communiquez avec le service à la clientèle pour des instructions.



Serene Innovations, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650

Toll Free: 866.376.9271 Local: 562.407.5400 www.sereneinnovations.com

Copyright © 2013 Serene Innovations, Inc. All rights reserved.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

FCC Certification Requirements

Caution: Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.